

MED-E-LERT

No coloque el MED-E-LERT bajo sol directo o luz ultravioleta fuerte porque podría dañarse.

MANUAL

1. Inserte las Baterías.



Inserte 4 baterías AA en el compartimiento indicado.

2. Como Abrir.



Presione suavemente con el dedo la lengüeta frontal del Med-E-Lert tal como se muestra.

3. Como limpiar la Bandeja.



Utilice un trapo húmedo o una esponja para su limpieza.

4. Cargando el dispensador Med-E-Lert.



2. dos veces al día.
3. tres veces al día.
4. cuatro veces al día.



El Med-E-Lert se suministra con discos claramente impresos. Los discos identifican el día de la semana, y el número apropiado de dosis por día (2,3 o 4 dosis al día).

El disco apropiado para el régimen de medicamentos se coloca en la bandeja, plegando las lengüetas para asegurar el compartimiento de píldoras, antes de llenarlo, se utiliza como guía para colocar las píldoras.

La organización de los medicamentos, la asignación de la hora de la dosis y la determinación de los medicamentos que se colocan en cada ranura es responsabilidad suya, de su cuidador y/o de su proveedor médico.

La frecuencia de reposición dependerá del número de medicamentos diarios, por ejemplo:

- Dos veces al día, reponer el medicamento cada 14 días.
- Tres veces al día, reponer el medicamento cada 9 días.
- Cuatro veces al día, reponer el medicamento cada 7 días.

5. Ajuste del reloj.

Botón 1 Izquierda - Botón 2 medio - Botón 3 derecha.



▲ Presione el Botón 1

1. Presione el Botón 1 por unos segundos (hasta que indicador ":" titile) y luego suelte.

TITILA

8. Tonos de Alarma



El MED-E-LERT T tiene 3 tonos de alarma diferentes y modo silencioso para ajustarse a sus requerimientos auditivos. Los símbolos A, B y A+B en la pantalla indican el tono de alarma seleccionado. Si se selecciona el modo silencioso no aparecerá ni A ni B. Para cambiar el tono de alarma, mantenga presionado el botón 3 y luego simultáneamente mantenga presionado el botón 1 para elegir el próximo tono. Continúe manteniendo presionado el botón 3 y presione el botón 1 para oír y luego seleccionar los diferentes tonos.

Presione el botón 3 y luego presione el botón 1 para elegir el siguiente tono de alarma.


9. Prueba



Presione el botón 1 por 12 segundos, aparece CH.


CH 1 prueba de pantalla

La pantalla muestra CH 1. Los segmentos de la pantalla se iluminan.

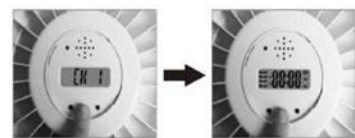

CH 2 prueba de pantalla

La pantalla muestra CH2. La bandeja deberá rotar un compartimiento.

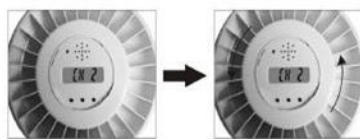

CH 3 Prueba de Alarma

La pantalla muestra CH3. La alarma deberá sonar y la luz roja led se prendera. Voltee el MED-E-LERT para RESETEAR la función (Como si dispensara medicamento). El sonido y la luz roja se apagaran. El mensaje CH4 aparecerá en pantalla si no se voltea el dispositivo antes de 10 segundos.




La luz se prende roja.

Si el MED-E-LERT no rota debidamente el motor se detendrá después de unos segundos y aparecerá el mensaje de error "CH6".

Salga del modo de prueba presionando el botón 3. Si tuvo un malfuncionamiento del dispositivo, por favor reemplace las baterías para resetear.

CH 2 prueba de pantalla

La pantalla muestra CH2. La bandeja deberá rotar un compartimiento.

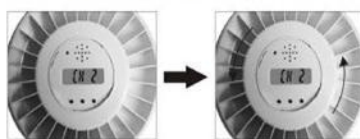

CH 3 Prueba de Alarma

La pantalla muestra CH3. La alarma deberá sonar y la luz roja led se prendera. Voltee el MED-E-LERT para RESETEAR la función (Como si dispensara medicamento). El sonido y la luz roja se apagaran. El mensaje CH4 aparecerá en pantalla si no se voltea el dispositivo antes de 10 segundos.



La luz se prende roja.

Si el MED-E-LERT no rota debidamente el motor se detendrá después de unos segundos y aparecerá el mensaje de error "CH6".

Salga del modo de prueba presionando el botón 3. Si tuvo un malfuncionamiento del dispositivo, por favor reemplace las baterías para resetear.



▲ Presione el Botón 2



▲ Presione el Botón 3

2. Programe la hora presionando el Botón 2 (hora) y el Botón 3 (minutos).

TITILA
Programa la hora.

3. Presione el Botón 1 para guardar la hora.

TITILA
Programa minutos.

6. Ajuste y verificación del horario de alarmas.



1. Presione y libere el botón 1, el símbolo de alarma comenzará a titilar. Para fijar la hora de alarma 1, presione el botón 2 (hora) y 3 (minutos). Si desea cancelar la alarma, presione el botón 2 hasta que se visualice, lo que ocurrirá después de las 23:00 o de las 11:00 P.M.




2. Después que haya programado la hora de la alarma, presione el botón 1 otra vez para confirmar y avanzar al siguiente ajuste de alarma.



3. El símbolo de la alarma 2 titilará. Para programar la hora de alarma 2, utilice el botón 2 y 3.

10. Bloquear y Desbloquear el MED-E-LERT.

Para bloquear, inserte la llave y gire 1/4 de vuelta a la izquierda. Para desbloquear, inserte la llave y gire 1/4 de vuelta a la derecha.

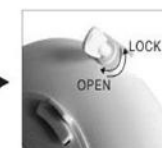

11. Como Apagar la Alarma.



Para apagar la alarma y dispensar el medicamento. Levante el MED-E-LERT y volteelo, dejando caer las pastillas en la mano o en un contenedor adecuado.